

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/mata-do-kapieli-perełkowej-mega-whirl-swiatłoterapia-p-615.html>



Mata do kąpieli perełkowej Mega Whirl - Światłoterapia

Cena brutto	5 490,00 zł
Cena netto	4 463,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904139300008

Opis produktu

Hydroterapia jest jedną z najstarszych metod leczenia wielu dolegliwości, a co najważniejsze jest jedną z najbardziej dostępnych i bezpiecznych. Leczenie z wykorzystaniem wody jest formą terapii, nie tylko dostępną w profesjonalnych gabinetach odnowy biologicznej. Dzięki matom ozonowym nasi klienci mogą korzystać z kąpieli perełkowych w zaciszu domowej łazienki wpływając korzystnie na swój organizm. Kąpiel perełkowa działa odpężająco, detoksykująco oraz leczniczo. Jej efektywność zwiększona jest wtedy, gdy stosujemy odpowiednie, naturalne olejki.



Prezentowany model maty Mega Whirl jest najnowszym osiągnięciem niemieckiej firmy Mag Frenkel. Wieloletnie doświadczenie oraz liczne badania sprawiły, że firma ta opracowała model maty do kąpieli perełkowej z opatentowanymi włóknami typu runoway (włóknisty), który wytwarza miliardy mikropęcherzyków, które przyjemnie drażnią skórę. Z kolei duże ciśnienie wytwarzane przez generator powoduje intensywny masaż ciała.

Jak działa kąpiel perełkowa i czynniki jej oddziaływania

1. Kąpiel perełkowa - przyływ energii:

Sam przyływ energii powoduje, że organizm pozbawiony jest ciężaru. Stan zawieszenia, w którym się znajduje, wzmacnianym dodatkowo działaniem pęcherzyków sprawia, że ruchy stają się o wiele łatwiejsze.

2. Ciśnienie wody wytwarzane podczas kąpieli perełkowej:


czyli tzw. ciśnienie hydrostatyczne pobudza krążenie krwi w kierunku serca. Wspomaga również transport produktów przemiany materii.

3. Nawilżenie:

W trakcie kontaktu wody ze skórą organizm trenuje regulację ciepła w naczyniach krwionośnych, co również wpływa na poprawę przemiany materii.

4. Temperatura:


Kąpiele w temperaturze 35 stopni Celsjusza odczuwana jest przez nas jako przyjemna. Im bardziej oddalimy się od tej temperatury w górę lub dół, tym bodźce oddziałujące na nasz organizm zmieniają jego reakcje. Ponieważ woda w trakcie masażu/kąpieli perełkowej znajduje się w ciągłym ruchu bodźce ulegają wzmocnieniu. Istotną rolę odgrywa tu również masaż, którego siła sprawia, że temperatura wodny poniżej 34 stopni Celsjusza odczuwana jest w rzeczywistości jako wyższa. Skala reakcji organizmu na kąpiel perełkową obejmuje następujące stopnie: **odświeżenie-chłód-silne, pobudzenie-chłód-gorąco-uspokojenie-obojętność- maksymalne stłumienie reakcji - stan gotowości do snu - ciepło-bardzo ciepło.**

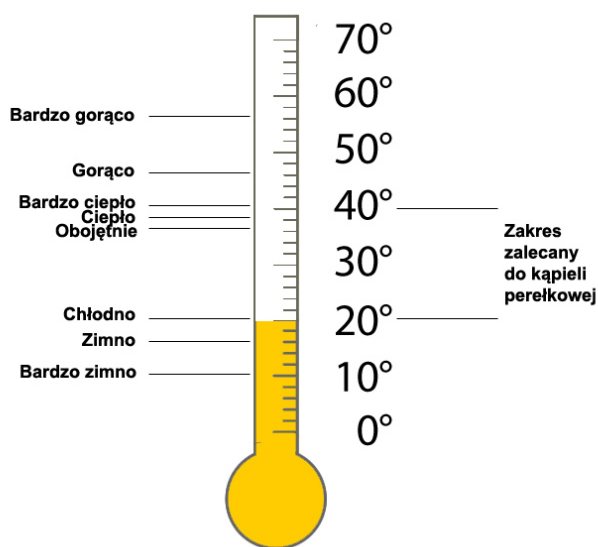

5. Duże pęcherzyki.

Duże pęcherzyki sprawiają, że silny masaż odczuwany jest jako poklepujący, a samo jego działanie przenoszone jest przez skórę do głębiej położonych tkanek. W ten sposób dociera ono do mięśni, stawów, a także do często sprawiających problemy chrząstek między kręgowych, a nawet do organów wewnętrznych.

Na przykład: masaż wprowadza jelita w ruch w jamie brzusznej, czego efektem są szybciej transportowane produkty przemiany materii. Masaż mięśni, tkanki łącznej oraz stawów dużymi pęcherzykami prowadzi do rozluźnienia i lepszego ukrwienia. to istotny element w terapii napięcia mięśni, rwy kulszowej, uszkodzenia chrząstek międzykręgowych, dolegliwości ramion, przedramion oraz innych tego typu schorzeń.

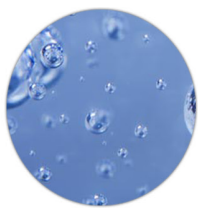

6. Drobne pęcherzyki.

Drobne pęcherzyki są o wiele ważniejsze i bogatsze w energię. Z ich pomocą można wywołać aż 10 pozytywnych zmian w organizmie.


Drobne pęcherzyki wznoszą się w wodzie bardzo powoli, są naładowane elektrycznie i osadzają się bardzo gęsto, jeden przy drugim na powierzchni skóry. Ciało całkowicie otoczone pęcherzykami staje się coraz lżejsze i zaczyna się prawie bezwładnie unosić w wodzie. Dzięki wysokiemu ciśnieniu wewnętrznemu najmniejsze z tych pęcherzyków wciskają w pory skóry transportowane przez siebie substancje: tlen, olejki eteryczne, które wchłaniane są przez krążącą w organizmie krew. Ponieważ w trakcie kąpieli perełkowej ukrwienie skóry wzrasta aż o 115% w bardzo krótkim czasie, znaczna ilość tych wartościowych substancji wchłaniana jest przez organizm.

Ponadto, kiedy pęcherzyki pod wpływem strumienia wody odrywają się od powierzchni skóry, porywają ze sobą cząsteczki brudu, a także złuszczone naskórek (oczyszczające działanie kąpieli z masażem wodnym).



MATA DO KĄPIELI PEREŁKOWEJ MEGA WHIRL ZE ŚWIATŁOTERAPIĄ

Ta najnowsza mata firmy MAG FRENKEL jest jedynym modelem, w którym zastosowano dysze filtrujące (runowe), które zapobiegają powstawaniu osadu, tworzenia się kamienia, a co za tym idzie, przedłużona zostaje żywotność samej maty. Ponadto zastosowanie większych dysz zwiększa efektywność masażu wirowego i strumieniowego.

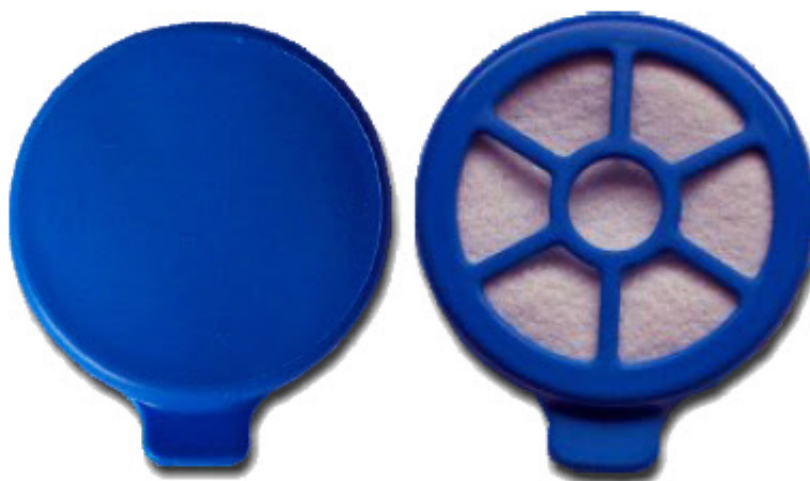

Dzięki możliwości wymiany dysz, ta mata do kąpielii perełkowej pozwala osiągnąć efekt mikromasażu czy efektu bańki (wprowadzenie w stan głębokiego relaksu).

Duże regulowane oraz wymienne dysze masujące masują szyjny, piersiowy i lędźwiowy odcinek kręgosłupa oraz okolice nerwu kulszowego. Oddziałują one rewelacyjnie na punkty receptoralne, które odpowiadają za napięcie mięśniowe, a także dolegliwości bólowe. Mata do kąpielii perełkowej MegaWhirl stosowana jest do zabiegów hydromasażu wzdłuż kręgosłupa, mięśni przykręgosłupowych, ramion, barków, karku, kończyn dolnych i górnych.

Na uwagę zasługuje trzyczęściowe siedzisko, które zostało wykonane z antybakteryjnego materiału. Każdy element można zdjąć indywidualnie, zapewniając największy poziom komfortu użytkownikowi.

Długość prezentowanej maty to 150 cm, natomiast jej szerokość wynosi aż 45 cm.



Nieodłącznym elementem maty do kąpielii ozonowej jest generator. Generator DREAM jest cyfrowo sterowanym wysokowydajnym źródłem sprężonego powietrza. Strumień powietrza jest podgrzewany (aby temperatura kąpielii nie obniżała się), wzbogacony w ozon (udowodnione działanie terapeutyczne) i doprowadzany za pomocą elastycznego węża do umieszczonej w wannie maty wyposażonej w odpowiednie dysze. Intensywność oraz czas trwania poszczególnych cykli pracy urządzenia sterowana jest przez wbudowany mikrokontroler. Są w nim zapisane na stałe programy kąpielii opracowane na podstawie wieloletnich

badani, a także możliwe jest dowolne sterowanie parametrami pracy urządzenia.

KOLORY PRYZMATU ŚWIETLNEGO LED



PROGRAMY GENERATORA MATY DO KĄPIELI RELAKSUJĄCEJ

Bodźce napływające wolno, niezbyt silne, niezbyt długotrwałe, do zastosowania np. wieczorem przed snem.

Zalecana temperatura wody:

36 stopni Celsjusza

Ozon: wyłączony

Interwał: włączony

"Odprężający" P2

Powolnie napływające, naprzemiennie wzmacniane i osłabiane bodźce. W fazie "obniżenia intensywności bodźców" umożliwia głębokie odprężenie.

Zalecana temperatura wody:

36 stopni Celsjusza

Ozon: wyłączony

Interwał: wyłączony

"Orzeźwiający" P3

Rytmiczny napływ coraz silniejszych bodźców, do zastosowania przede wszystkim rano.

Zalecana temperatura wody:

30 stopni Celsjusza

Ozon: włączony





Interwał: wyłączony

"Trening układu krążenia" P4

Bodźce krótkie, wzmacniane dodatkowo wytwarzaniem ozonu, idealny trening pobudzający cały organizm, a w szczególności naczynia krwionośne

Zalecana temperatura wody:

37 stopni Celsjusza

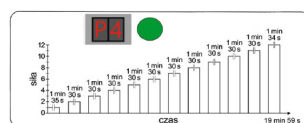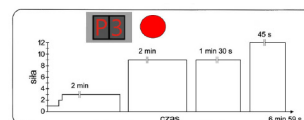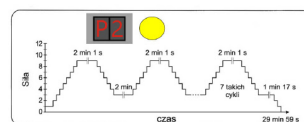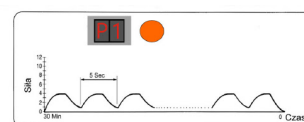

Ozon: włączony
Interwał: wyłączony

"Masaż sportowy" P5


Bodźce wznoszące, w określonych odstępach czasowych utrzymujące się na najwyższym poziomie. Do zastosowania przed lub po wysiłku sportowym w celu intensywnego pobudzenia krążenia.

Zalecana temperatura wody:

32 stopnie Celsjusza

Ozon: włączony

Interwał: wyłączony

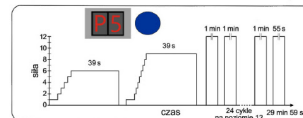

Poza "gotowymi" programami urządzenia istnieje możliwość ręcznego ustawienia przebiegu kąpieli, według indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Istnieje możliwość ustawienia czasu trwania kąpieli oraz mocy wytwarzania pęcherzyków. Leżąc w wannie urządzenie można obsługiwać wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania, a po zakończeniu kąpieli z wanny należy wychodzić powoli, znajdując mocne oparcie.

Funkcja Interwał:

Włączenie funkcji "interwał" powoduje cykliczne przerywanie masażu na około 10 sekund. Najpierw należy wybrać pożądaną poziom mocy, a następnie nacisnąć przycisk interwału. Urządzenie będzie działać przez 30 sekund, a następnie zatrzyma się na 10 sekund. Ten cykl działa, dopóki funkcja interwału nie zostanie wyłączona. Gdy interwał będzie aktywny, zapali się również czerwona lampka kontrolna na jednostce sterującej. Symbol interwału zapala się również na wyświetlaczu.

Funkcja OZON

Sterownik wyposażony jest w lampę ozonową. Emituje ona promienie UV, a tym samym wytwarza ozon tzw "aktywny tlen". Ozon rozbija się łatwo w kontakcie z materiałem organicznym wyzwalamy przy tym energię.

Prowadzi to do zwiększonego mrowienia skóry i zwiększa intensywność masażu. Ozon również neutralizuje brzydki zapach i zabija mikroorganizmy znajdujące się w wodzie. Gdy ozon jest aktywny, zielona lampka kontrolna świeci się na jednostce sterującej. Funkcja szczególnie polecana do użytku z kociółkiem do masażu Kneippa.

Funkcja Światłoterapii

Światłoterapia uważana jest za stosunkowo nową metodą stosowaną nie tylko w medycynie, ale również w kosmetologii. Ten nieinwazyjny, prosty zabieg oddziałuje na skórę światłem o różnych kolorach. Dzięki naszej macie ozonowej z generatorem DREAM można w zaciszu domowym korzystać z zalet kąpieli perełkowej oraz światłoterapii/fototerapii.

- **Kolor czerwony** ma za zadanie dodać energii i wzmocnić organizm. Korzystnie wpływa również na aktywność umysłową. Kąpiele z zastosowaniem światła czerwonego w generatorze łagodzą infekcje dróg oddechowych, objawy przeziębień. Pomagają również przy bólach reumatycznych, a także w anemii.
- **Kolor fioletowy** regeneruje komórki, usuwa blizny, poprawia wygląd skóry.
- **Kolor żółty** ma na celu ożywienie i pobudzenie umysłu. Pozytywnie wpływa na system nerwowy, poprawia również nastrój. Pomaga w leczeniu alergii, niektórych chorobach skóry, cukrzycy, dolegliwości żołądka, dolegliwości wątroby, niedomagań w trakcie okresu menopauzy.
- **Kolor zielony** odpręża, wycisza i uspokaja. Pomaga w leczeniu dolegliwości sercowych, bólów głowy oraz grypy.
- **Kolor niebieski** uspokaja, ułatwia koncentrację. Zmniejsza stany zapalne.
- **Kolor fioletowy** uśmierza ból, odpręża i koł nerwy.

Dane techniczne generatora:

- Napięcie: 230 V - 50 Hz
- Moc całkowita: 970 W
- Moc silnika: 650 W
- Moc ogrzewania powietrza: 250 W (max wysokość wody 350 mm)
- Czas pracy urządzenia: max 30 minut, następnie co najmniej 30 minut przerwa w działaniu
- Przepływ powietrza do 1800l/min.
- Kabel sieciowy długość 2m, podwójnie izolowany
- Urządzenie posiada filtr przeciwzakłóceń.

Funkcje terapeutyczne maty:

-
- stopy - staw skokowy, masaż receptorów (akupresura);
 - łydki - mięśnie podudzia, ścięgno Achillesa;
 - stawy kolanowe - więzadła podkolanowe;
 - stawy biodrowe - nerw kulszowy;
 - kości krzyża - napięcia mięśniowe (długotrwała pozycja siedząca);
 - gorset mięśniowy grzbietu - lędźwi, boczne mięśnie tułowia;
 - kręgosłup - więzadła międzykręgowe (zwyrodnienia), mięśnie przykręgosłupowe (odpowiedzialne za prawidłową anatomiczną pozycję);
 - obręcz barkowa - napięcia międzyłopatkowe (zastrzały);
 - szyja - odcinek ścięgna głównego (ból głowy);
 - aparat ruchu - osteoporoza, reumatyzm, artretyzm, bóle stawów.

W skład zestawu wchodzi następujące produkty:

- Najnowsza Mata do kąpieli perełkowej MegaWhirl,
- Najnowszy Generator DREAM z wbudowanym pryzmatem świetlnym
- Wodoodporny pilot zdalnego sterowania
- Akcesoria masujące: przystawka do inhalacji, masażu punktowego piersi, dysza do intensywnych biczów wodnych.
- Poduszka z przyssawkami, dysze masujące.
- Wanienska do masażu wirowego stóp (metoda Kneippa).
- Termometr pomagający ustawić prawidłową temperaturę wody.
- Instrukcja obsługi urządzenia.
- Książeczka o zastosowaniu i wskazaniach do kąpieli perełkowej. W wersji drukowanej lub ksero.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.