

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/metalowy-stopien-medyczny-p-375.html>

Metalowy stopień medyczny



Cena brutto	362,00 zł
Cena netto	294,31 zł
Czas wysyłki	3-4 tygodnie
Numer katalogowy	SN-WS-STM-1


Opis produktu

Prezentujemy metalowy stopień medyczny - Twoje doskonałe rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań. Nasz stopień metalowy STM wyróżnia się nie tylko stabilną stalową konstrukcją malowaną proszkowo, ale także wyjątkowo wytrzymałym i odpornym na wszelkie uszkodzenia materiałem HPL używanym do wykonania jego podestu.

Dzięki swojej solidnej konstrukcji i dbałości o najwyższą jakość wykonania, nasz stopień medyczny jest idealnym wyborem dla placówek medycznych, gabinetów lekarskich czy innych miejsc, gdzie bezpieczeństwo i trwałość są priorytetem.

Specyfikacje techniczne:

- Wysokość: 20 cm
- Szerokość: 55 cm
- Głębokość: 28 cm
- Masa własna: 10 kg
- Maksymalne obciążenie: 160kg

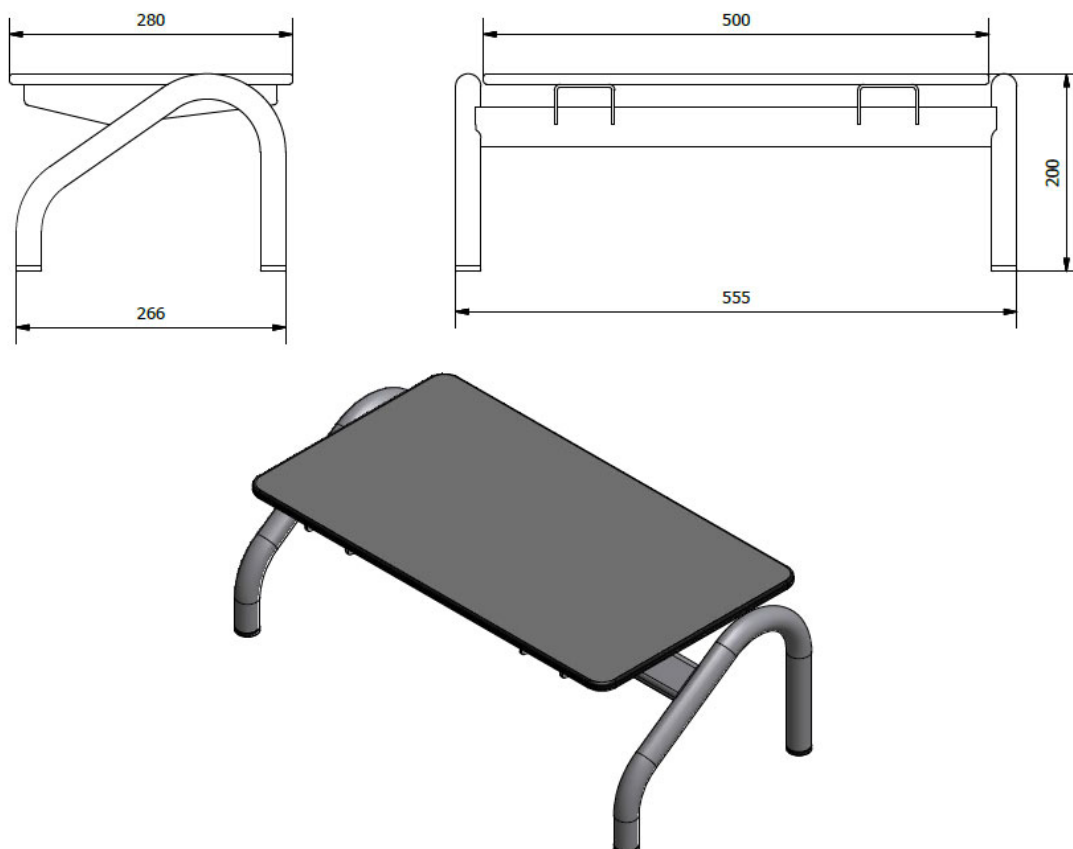

Nie tylko spełnia on surowe wymagania branży medycznej, ale także zapewnia niezrównaną trwałość i odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Zastosowany materiał HPL jest znany z wyjątkowej wytrzymałości na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne, co czyni ten produkt nie tylko funkcjonalnym, ale także praktycznym i trwałym.

Dzięki nieszablunowemu designowi i solidnemu wykonaniu, nasz metalowy stopień medyczny STM to idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb. Niezawodność i wytrzymałość tego produktu są gwarantowane, co czyni go doskonałym wyborem dla wymagających profesjonalistów w dziedzinie medycyny.

Poniżej instrukcja konserwacji oraz dezynfekcji stopnia:

1. Bieżące czyszczenie (Codzienne)

Powierzchnia HPL (Podest):

Środki: Ciepła woda z dodatkiem łagodnego detergentu (np. płyn do naczyń, mydło w płynie) lub uniwersalne środki do czyszczenia powierzchni twardych.

Metoda: Przecierać miękką szmatką lub gąbką. W przypadku mocniejszych zabrudzeń można użyć miękkiej szczoteczki nylonowej. **Ważne:** Po umyciu należy wytrzeć powierzchnię do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug i osadów z kamienia.

Konstrukcja stalowa (Malowana proszkowo):

- **Środki:** Wyłącznie łagodne roztwory o neutralnym pH (6-8).
- **Metoda:** Delikatne przecieranie wilgotną szmatką z mikrofibry.
- **Uwaga:** Unikać zalewania konstrukcji dużą ilością wody, szczególnie w miejscach łączeń i spawów.

2. Dezynfekcja

Oba materiały są odporne na działanie chemii, jednak należy zachować dyscyplinę w doborze preparatów:

- **Zalecane środki:** Preparaty na bazie **alkoholu etylowego lub izopropylowego (70%)** oraz środki na bazie czwartorzędowych soli amoniowych.
- **Sposób aplikacji:** Nanieść środek na czystą ściereczkę i przetrzeć powierzchnię lub spryskać bezpośrednio (o ile instrukcja środka dezynfekującego na to pozwala).
- **Czas kontaktu:** Należy przestrzegać czasu kontaktu z powierzchnią określonego przez producenta środka dezynfekującego, a następnie opcjonalnie przetrzeć suchą szmatką.

3. Czego należy bezwzględnie unikać?

Aby nie uszkodzić powłoki ochronnej metalu oraz struktury laminatu HPL, zabrania się stosowania:

1. **Ścierniw:** Mleczek z drobkami, proszków do szorowania, druciaków oraz twardych gąbek (mogą zmatowić lakier proszkowy).
2. **Silnych kwasów i zasad:** Środków do czyszczenia toalet, odkamieniaczy o wysokim stężeniu oraz wybielaczy na bazie chloru (mogą spowodować odbarwienia HPL i korozję stali).
3. **Rozpuszczalników nitro i acetonu:** Mogą trwale uszkodzić strukturę farby proszkowej.

4. Konserwacja i kontrola

- **Kontrola uszkodzeń:** Raz w miesiącu należy sprawdzić, czy powłoka lakiernicza nie posiada ubytków mechanicznych (odprysków). W przypadku ich wystąpienia należy je zabezpieczyć farbą zaprawkową, aby zapobiec korozji podpowłokowej.
- **Osuszanie:** Zawsze pamiętaj o wycieraniu podestu do sucha – mimo odporności HPL, zalegająca woda przy krawędziach może w dłuższym terminie wpływać na estetykę produktu.

Wskazówka: Przed użyciem nowego, silniejszego środka czystości, zaleca się wykonanie testu w mało widocznym miejscu konstrukcji.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta Kolorów RAL: brak , 7016 , 9003 , 9006